

WIDEX **UNIQUE™**

GEBRUIKSAANWIJZING  
**DE WIDEX UNIQUE™ FAMILIE**

Model U-FM  
Achter-het-oor



**WIDEX®**  
HIGH DEFINITION HEARING

# UW WIDEX® HOORTOESTEL

*(In te vullen door de audicien)*

**Uw hoortoestelserie:**

---

## PROGRAMMA'S

---

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Universal | <input type="checkbox"/> Audibility Extender |
| <input type="checkbox"/> Quiet     | <input type="checkbox"/> Audibility Extender |
| <input type="checkbox"/> Transport | <input type="checkbox"/> Audibility Extender |
| <input type="checkbox"/> Urban     | <input type="checkbox"/> Audibility Extender |
| <input type="checkbox"/> Party     | <input type="checkbox"/> Audibility Extender |
| <input type="checkbox"/> Music     | <input type="checkbox"/> Audibility Extender |
- 

## SPECIALE PROGRAMMA'S

---

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Zen   | <input type="checkbox"/> Audibility Extender |
| <input type="checkbox"/> Phone | <input type="checkbox"/> Audibility Extender |
-

## SMARTTOGGLE-PROGRAMMA'S

---

Zen+

Audibility Extender

---

Phone+

Audibility Extender

---

### LET OP

De programmanamen in de tabel zijn de standaardnamen. Als u ervoor hebt gekozen om andere beschikbare namen te gebruiken, dan schrijft u de nieuwe namen in de tabel. Op die manier weet u altijd welke programma's u in uw hoortoestellen hebt.

### LET OP

Lees deze gebruiksaanwijzing en het boekje "Oorsets voor Widex hoortoestellen" aandachtig door voordat u het hoortoestel in gebruik neemt.

# INHOUD

<b>UW WIDEX HOORTOESTEL.....</b>	<b>6</b>
Welkom bij Widex.....	6
Belangrijke veiligheidsinformatie.....	8
<b>HET HOORTOESTEL.....</b>	<b>11</b>
Gebruiksindicaties.....	11
Bedoeld gebruik.....	11
De batterij.....	12
Geluidssignalen.....	14
Links en rechts onderscheiden.....	15
Het hoortoestel in- en uitschakelen.....	16
Uw hoortoestel plaatsen en verwijderen.....	17
Programma's.....	18
Programma en geluid aanpassen.....	21
Een telefoon gebruiken met hoortoestellen.....	23
<b>REINIGEN.....</b>	<b>24</b>
Instrumenten.....	24
Het hoortoestel reinigen.....	24
<b>ACCESSOIRES.....</b>	<b>26</b>
<b>PROBLEMEN OPLOSSEN.....</b>	<b>27</b>
<b>WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>30</b>

EG-richtlijnen.....	30
FCC- en IC-verklaringen.....	31
<b>SYMBOLEN.....</b>	<b>35</b>

# **UW WIDEX HOORTOESTEL**

## **Welkom bij Widex**


Gefeliciteerd met uw nieuwe hoortoestel.

Zorg ervoor dat u uw hoortoestel regelmatig gebruikt, ook al kan het even wennen zijn. Mensen die hun hoortoestel maar af en toe gebruiken, halen vaak niet alles eruit wat erin zit.

### **LET OP**

Uw hoortoestel en de accessoires kunnen er anders uitzien dan afgebeeld in deze gebruiksaanwijzing. We behouden ons tevens het recht voor om - indien nodig - veranderingen aan te brengen.

## Uw hoortoestel in een oogopslag

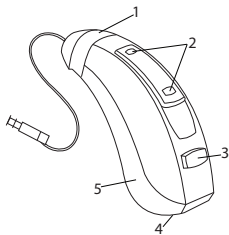

1. Oorset
2. Microfoonopeningen
3. Druktoets
4. Batterijklep met nagelgrip
5. Rechts-/linksmarkering

## Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze pagina's aandachtig door voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.



Hoortoestellen en batterijen kunnen gevaarlijk zijn indien ze worden ingeslikt of niet juist worden gebruikt. Inslikken of verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of zelfs overlijden. Neem bij inslikken onmiddellijk contact op met een arts.



Haal uw hoortoestellen eruit als u ze niet gebruikt. Dat helpt bij het doorluchten van de gehoorgang en het voorkomen van oorontstekingen.



Neem direct contact op met uw arts of audicien als u denkt dat u mogelijk een oorontsteking hebt.



Verwijder uw hoortoestellen voordat u gaat douchen, zwemmen of een haardroger gaat gebruiken.



Zorg ervoor dat u uw hoortoestellen niet in hebt als u parfum, spray, gel, lotion of crème opbrengt.



Maak uw hoortoestel niet droog in een magnetron, omdat het daardoor kapot zal gaan.





Gebruik nooit hoortoestellen van andere mensen en laat nooit andere mensen uw toestellen gebruiken, omdat uw gehoor hierdoor beschadigd kan raken.



Gebruik uw hoortoestellen nooit in omgevingen waar sprake kan zijn van explosieve gassen, zoals in mijnen e.d.



Houd hoortoestellen en de bijbehorende onderdelen, accessoires en batterijen uit de buurt van kinderen.



Probeer nooit zelf het hoortoestel te openen of te repareren. Neem contact op met uw audicien als uw hoortoestel gerepareerd moet worden.



Uw hoortoestellen bevatten radiocommunicatietechnologie. Let altijd op de omgeving waarin u ze gebruikt. Als er bepaalde beperkingen gelden, moet u de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om hieraan te voldoen.



**Uw hoortoestel is bijzonder krachtig en kan geluiden van meer dan 132 dB afspelen. Er kan daarom gevaar bestaan voor beschadiging van uw restgehoor.**



Stel uw hoortoestellen niet bloot aan extreme temperaturen of een hoge luchtvochtigheid en maak ze snel droog als ze nat worden of als u flink zweet.

Zorg er bij transport en opslag van uw hoortoestellen voor dat de temperatuur tussen  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  en  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$  en  $104\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) blijft en de luchtvochtigheid tussen 10%-95% rH.

Opslag en transport bij maximaal  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $140\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) en 10%-95% rH zijn acceptabel gedurende kortere periodes (maximaal 2 weken).

Uw hoortoestellen zijn ontwikkeld voor een werkbereik van  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) tot  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).

Ga voor meer informatie over uw hoortoestellen naar [www.widex.com](http://www.widex.com).

# HET HOORTOESTEL

## **Gebruiksindicaties**

De hoortoestellen zijn bedoeld voor personen ouder dan 36 maanden met een gehoorverlies waarvan de mate kan variëren van licht (0 dB HL) tot ernstig (95 dB HL) en alle configuraties van gehoorverlies.

De toestellen dienen te worden voorgeschreven/aangepast door hiertoe bevoegde personen (audiologen, audiciens, KNO-artsen) die zijn opgeleid op het gebied van hoorrevalidatie.

## **Bedoeld gebruik**

De hoortoestellen zijn bedoeld als zgn. luchtgeleidingshoortoestellen voor alledaagse luistersituaties. De hoortoestellen kunnen zijn voorzien van het Zen-programma, bedoeld om een ontspannende 'geluidsachtergrond' te bieden (d.w.z. muziek-/ruisbron) voor volwassenen die naar een dergelijke achtergrond willen luisteren in een rustige omgeving.

## De batterij

Gebruik een **type 312** zink-lucht batterij voor uw hoortoestel.

Gebruik altijd een geheel nieuwe batterij die exact overeenkomt met het type dat wordt aangeraden door uw audicien.

### LET OP

Controleer of de batterij helemaal schoon is zonder resten voordat u hem in het hoortoestel aanbrengt. Als u dit niet doet, werkt uw hoortoestel mogelijk niet naar behoren.

Volg bij het afdanken van batterijen de instructies op de verpakking en let op de vervaldatum.



Probeer de batterijen voor uw hoortoestel nooit opnieuw op te laden; ze kunnen dan exploderen.



Laat een lege batterij nooit in de hoortoestellen zitten wanneer u die opbergt. Die kan dan gaan lekken en uw hoortoestel beschadigen.

## Indicatie bijna lege batterij


Als de batterij leeg is, hoort u een geluidssignaal. Als de batterij plotseling leegloopt, hoort u mogelijk geen waarschuwing. Wij adviseren om altijd een reservebatterij mee te nemen.

## Batterij verwisselen

U verwisselt de batterij als volgt:



Verwijder de sticker van de nieuwe batterij en zorg ervoor dat er geen lijmresten meer op zitten. Laat de batterij 60 seconden "ademen".

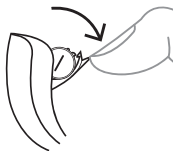

Gebruik de nagelgrip om het batterijdeksel voorzichtig open te klappen en haal de oude batterij eruit.



Plaats vervolgens de nieuwe batterij in de lade zoals op de afbeelding. Sluit de lade. Als deze niet makkelijk dichtgaat, zit de batterij er niet goed in. Verwijder de batterij als u het hoortoestel een paar dagen niet gebruikt.

## **LET OP**

Probeer uw hoortoestel niet te laten vallen. Houd het hoortoestel boven een zachte ondergrond als u de batterij verwisselt.

## **Geluidssignalen**

Uw hoortoestel speelt geluiden af om u erop te wijzen dat bepaalde functies zijn geactiveerd of dat u bent overgestapt op een ander programma. Bij deze geluiden kan het gaan om gesproken boodschappen of toontjes, afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren.

## **Programma 1** Boodschap/één kort piepje

---

**Programma 2** Boodschap/twee korte piepjes

---

**Programma 3** Boodschap/drie korte piepjes

---

**Programma 4** Boodschap/één kort en één lang piepje

---

**Programma 5** Boodschap/één lang piepje en twee korte piepjes

---

**Zen+** Boodschap/toontje

---

Vraag uw audicien om deze geluiden uit te schakelen als u die niet nodig hebt.

### **Verloren partnerhoortoestel**


(Alleen beschikbaar in draadloze 440-serie)

Uw audicien kan een functie in uw hoortoestel inschakelen die u waarschuwt wanneer het toestel het contact verliest met het hoortoestel in het andere oor. U hoort dan een gesproken boodschap in uw oor.

### **Links en rechts onderscheiden**

Het hoortoestel voor uw rechteroor heeft een rode markering. Het hoortoestel voor uw linkeroor heeft een blauwe markering.

## Het hoortoestel in- en uitschakelen

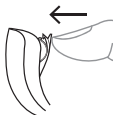

Om het hoortoestel in te schakelen, sluit u de batterijklep. Het hoortoestel geeft via een geluidssignaal aan dat het is ingeschakeld, tenzij uw audicien deze functie heeft uitgeschakeld.



Om het hoortoestel uit te schakelen, drukt u de batterijklep omlaag.

### LET OP

U kunt het hoortoestel ook in uw gesloten hand houden om te controleren of het is ingeschakeld. Als het ingeschakeld is, zal het nu fluiten.

Schakel het hoortoestel uit als u het niet gebruikt.



## Uw hoortoestel plaatsen en verwijderen




1. Plaats eerst de oorset in de gehoorgang, waarbij u het onderste deel van het slangetje vasthoudt. Het kan handig zijn om tegelijkertijd het buitenoor naar boven en naar achteren te trekken.
2. Vervolgens plaatst u het hoortoestel achter het oor. Het hoortoestel moet goed op het oor rusten, vlak bij uw hoofd.

Uw hoortoestel kan worden voorzien van verschillende soorten oorsets. Meer informatie over uw oorset vindt u in de aparte gebruiksaanwijzing voor de oorset.

### LET OP

Voelt het hoortoestel niet comfortabel aan of past het niet goed en veroorzaakt het irritatie, roodheid of iets dergelijks, neem dan contact op met uw audicien.

### Het hoortoestel verwijderen

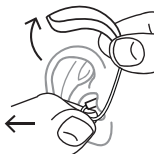

Haal eerst het hoortoestel achter het oor vandaan.

Trek vervolgens rustig de oorset uit de gehoorgang, waarbij u het onderste deel van het slangetje vasthoudt.

## Programma's

### PROGRAMMA'S

### GEBRUIK

---

Universal

Voor dagelijks gebruik

---

Quiet

Speciaal programma voor luisteren in stille omgevingen

---

Transport

Voor het luisteren in situaties met lawaai van auto's, treinen enz.

---

Urban

Voor het luisteren in situaties met wisselende geluidsniveaus (supermarkten, rumoerige werkplekken e.d.)

---

**PROGRAMMA'S****GEBRUIK**

Party

Voor het luisteren in situaties waarbij veel mensen tegelijk aan het praten zijn

Music

Voor het luisteren naar muziek

**SPECIALE PROGRAMMA'S GEBRUIK**

Zen

Speelt tonen of geruis af voor een ontspannende geluidsachtergrond

Phone

Dit programma is ontwikkeld voor het luisteren naar telefoongesprekken

**SMARTTOGGLE-PROGRAMMA'S****GEBRUIK**

Zen+

Dit programma is vergelijkbaar met Zen, maar u kunt ook naar andere soorten tonen of geruis luisteren

## **SMARTTOGGLE- PROGRAMMA'S**

---

## **GEBRUIK**

Phone+

Met dit programma kunt u naar de telefoon luisteren en geluiden uit de omgeving vermijden. Een van uw hoortoestellen stuurt het telefoongesprek door naar het andere, zodat u met beide oren kunt luisteren

---

## **LET OP**

De namen in de lijst met programma's zijn de standaardnamen. Uw audicien kan ook een programmaam uit een vooraf geselecteerde lijst selecteren. Op die manier kunt u in alle luistersituaties eenvoudiger het juiste programma selecteren.

## **LET OP**

U kunt maar één SmartToggle-programma in uw hoortoestel gebruiken.

Afhankelijk van uw gehoorverlies kan uw audicien de functie Audibility Extender activeren. Vraag uw audicien of dit misschien iets voor u is.

Als uw behoeften en voorkeuren in de loop van de tijd veranderen, kan uw audicien heel makkelijk uw programmaselectie aanpassen.

## **Programma en geluid aanpassen**

Als u twee hoortoestellen hebt, kan de druktoets op verschillende manieren worden geprogrammeerd:

### **Als een speciale programmatoets:**

Om het programma te veranderen, tikt u heel eenvoudig op de toets. Om SmartToggle-programma's te openen en te sluiten, houdt u de druktoets langer dan één seconde ingedrukt (deze instelling is optioneel). Als u eenmaal in het SmartToggle-programma bent, kunt u tussen de verschillende Zen-stijlen wisselen door kort op de toets te tikken.

### **Als een speciale toets om het volume aan te passen:**

Tik op de toets op uw rechter hoortoestel als u meer geluidskwaliteit en meer volume wilt. Als u het volume wilt verlagen of meer comfort wilt, tikt u op de toets op uw linker hoortoestel.

Door langer op een van uw hoortoestellen te drukken, dempt u het geluid of schakelt u het weer in (deze instelling is optioneel).

**Als een gecombineerde toets voor programma en volume aanpassen:**

Als u deze optie hebt, tikt u op de toets op uw rechter hoortoestel als u meer geluidskwaliteit en meer volume wilt. Als u het volume wilt verlagen of meer comfort wilt, tikt u op de toets op uw linker hoortoestel. Door langer op een van uw hoortoestellen te drukken, verandert u het programma.

Als u slechts één hoortoestel hebt, verandert u met een korte tik het programma en met een lange tik gaat u naar de SmartToggle-programma's.

## Een telefoon gebruiken met hoortoestellen




Als u telefoneert, raden we u aan om de telefoon onder een hoek boven het oor te houden en niet tegen de oorschelp.

# REINIGEN

## Instrumenten

Bij uw hoortoestel ontvangt u de volgende reinigingsinstrumenten.

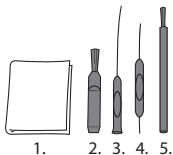

1. Doekje
2. Borstel
3. Lang reinigingspennetje
4. Kort reinigingspennetje
5. Batterijmagneet

## Het hoortoestel reinigen

Als u uw hoortoestel dagelijks reinigt, zal het efficiënter werken en comfortabeler aanvoelen.



Neem het hoortoestel af met een zachte doek (bijvoorbeeld de doek die u van uw audicien hebt gekregen).

Zijn de microfoonopeningen nog steeds verstopt, neem dan contact op met uw audicien.



Maak uw hoortoestel snel droog als het nat is geworden of als u veel zweet. Sommige mensen gebruiken een speciale droogmodule zoals de Widex Dry-Go als hulpmiddel om hun hoortoestellen droog en schoon te houden. Vraag uw audicien of dit iets voor u is.

Laat het batterijvak openstaan om het hoortoestel te ventileren.

Raadpleeg voor meer informatie over het reinigen van uw oorset de gebruiksaanwijzing van de oorset.



Gebruik geen vloeistoffen of desinfectiemiddelen om uw hoortoestellen te reinigen.



Controleer uw hoortoestel dagelijks na gebruik en maak het schoon. Als het hoortoestel stukgaat tijdens het dragen en kleine stukjes in uw gehoorgang achterlaat, dient u uw arts te raadplegen. Probeer de stukjes er nooit zelf uit te halen.

## ACCESSOIRES

Voor uw hoortoestel is een reeks accessoires verkrijgbaar. Overleg met uw audicien of deze accessoires iets voor u zijn.

<b>Naam</b>	<b>Gebruik</b>
RC-DEX	afstandsbediening
TV-DEX	voor het luisteren naar tv en audioapparatuur
PHONE-DEX	voor eenvoudig gebruik als vaste telefoon
FM+DEX	voor het streamen van audio- en FM-signalen
UNI-DEX	voor een draadverbinding met o.a. mobiele telefoons
CALL-DEX	voor een eenvoudige draadloze verbinding met mobiele telefoons
COM-DEX	voor een draadloze verbinding met mobiele telefoons en andere apparaten via Bluetooth

Uitsluitend in een aantal landen beschikbaar

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Op deze pagina's vindt u adviezen die u kunt volgen als uw hoortoestel niet of niet goed werkt. Neem contact op met uw audicien als het probleem blijft bestaan.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Het hoortoestel is volledig stil	Toestel is niet ingeschakeld	Controleer of de batterijlade volledig gesloten is
	De batterij werkt niet	Plaats een nieuwe batterij
Het hoortoestel is niet luid genoeg	Uw oor is verstopt met oorsmeer	Neem contact op met uw arts
	Uw gehoor kan zijn veranderd	Neem contact op met uw audicien/arts
Het hoortoestel fluit voortdurend	Uw oor is verstopt met oorsmeer	Neem contact op met uw arts

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Uw twee hoortoestellen werken niet synchroon	De verbinding tussen de twee hoortoestellen is verbroken	Schakel ze uit en weer in
De hoortoestellen reageren niet correct op een verandering van programma of volume met de regelaar	<p>a. Het apparaat wordt gebruikt buiten het zendbereik</p> <p>b. Er is een bron met sterke elektromagnetische (EM) interferentie in de nabijheid</p> <p>c. Het apparaat en de hoortoestellen zijn niet gematcht</p>	<p>a. Houd het apparaat dichterbij de hoortoestellen</p> <p>b. Vergroot de afstand tot de bron van EM-interferentie</p> <p>c. Vraag uw audicien of het apparaat is gematcht met hoortoestellen</p>

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Spraak klinkt onderbroken (aan en uit) of u hoort geen spraak in het hoortoestel dat zendt.	a. De batterij van één van de hoortoestellen is leeg b. Er is een bron met sterke elektromagnetische (EM) interferentie in de nabijheid	a. Vervang batterij in één of beide hoortoestellen b. Vergroot de afstand tot de bron van interferentie

### **LET OP**

Deze informatie gaat uitsluitend over de hoortoestellen. Zie de gebruiksaanwijzing “Oorsets voor Widex hoortoestellen” voor informatie over uw oorset. Blijft het probleem bestaan, raadpleeg dan uw audicien.

# WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

## EG-richtlijnen

### Richtlijn 1999/5/EG

Hierbij verklaart Widex A/S dat het apparaat U-FM in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring in overeenstemming met 1999/5/EG is te vinden op:

<http://widex.com/doc>



N26346

### Informatie over afvoer

Gooi hoortoestellen, hoortoestelaccessoires en batterijen niet weg met huishoudelijk afval.

Hoortoestellen, batterijen en hoortoestelaccessoires moeten worden afgevoerd als elektrische en elektronische apparatuur, of worden afgegeven bij uw audicien. Het juist afvoeren helpt de gezondheid en het milieu te beschermen.

## **FCC- en IC-verklaringen**

FCC ID: TTY-UFM

IC: 5676B-UFM

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## LET OP

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



## LET OP

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

# SYMBOLLEN

## Symbolen

Veelgebruikte symbolen door Widex A/S voor de etikettering van medische hulpmiddelen (labels/IFU/enz.)

### Symbool Titel/beschrijving

---



#### Fabrikant

Het product wordt geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool staan. Indien van toepassing wordt ook de productiedatum genoemd.

---



#### Catalogusnummer

Het catalogus-/itemnummer van het product.

---



#### Zie de gebruiksaanwijzingen

In de gebruiksaanwijzingen staat belangrijke waarschuwingeninformatie (waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen) die vóór gebruik van het product moet worden gelezen.

---

## **Symbool Titel/beschrijving**

---



### **Waarschuwing**

Tekst met een symbool voor waarschuwing moet vóór gebruik van het product worden gelezen.

---



### **WEEE-symbool**

"Niet bij het reguliere afval"



Als het product wordt afgedankt, moet het voor recycling worden ingeleverd bij een inzamelpunt om te voorkomen dat de aanwezige gevaarlijke stoffen schade toebrengen aan het milieu of schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

---



### **CE-markering**

Het product voldoet aan de eisen in de Europese richtlijnen inzake het CE-keurmerk.

---

## Symbol Titel/beschrijving

---



### **RCM-markering**

Het product voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van elektrische veiligheid, EMC en radioband voor producten die op de Australische of Nieuw-Zeelandse markt worden gebracht.

---



### **Interferentie**

Er kan zich elektromagnetische (EM) interferentie voordoen in de nabijheid van het product.

---







**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark  
[www.widex.com](http://www.widex.com)

**CE** 0459

Gebruiksaanwijzing no:  
9 514 0329 007 #01  
uitgave:  
2016-05

