



DRAADLOZE CONNECTIVITEIT

resound.com

# ReSound Micro Mic Handleiding

**ReSound**  
Real Connect. Real Hearing.

## **Welkom**

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ReSound Micro Mic.

De Micro Mic is een draagbare microfoon/streamer die spraak en audio van hoge geluidskwaliteit direct naar uw hoortoestel streamt.

Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle opties van de Micro Mic. Raadpleeg uw hoorspecialist bij overige vragen.

Nog meer informatie over de ReSound Micro Mic vindt u op de website van ReSound: [www.resound.com](http://www.resound.com)

Lees voor uw eigen veiligheid het hoofdstuk 'Belangrijke informatie' op pagina 28 goed door!

FCC ID: X26SM-2M

## **Verklaring:**

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van de IC-regels. Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: (1) dit apparaat mag geen storende interferentie veroorzaken en (2) elke vorm van interferentie moet worden geaccepteerd, inclusief interferentie die leidt tot ongewenste werking.

Let op: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de eisen die aan Klasse B digitale apparatuur worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. Als dit apparaat storende interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen te bepalen is door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen:

- De antenne van de ontvanger opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.

- Het apparaat op een ander voedingscircuit aansluiten dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- De verkoper of een ervaren radio/televisiemonteur raadplegen.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

## **Gebruiksbestemming**

De ReSound Micro Mic is bestemd om de gebruiker van ReSound hoortoestellen in staat te stellen om spraak beter te volgen of andere audiosignalen te horen.

Dit product is in overeenstemming met de volgende standaard-eisen:

In de EU: Het toestel voldoet aan de Essentiële vereisten volgens Annex 1 van de Richtlijn 93/42/EEC voor medische apparatuur (MDD) en de Essentiële vereisten en andere relevante voorzieningen van Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

De conformiteitsverklaring kan worden ingezien op [www.resound.com](http://www.resound.com).

In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.

In Canada: IC 6941C-SM2M

Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
2. Elke vorm van storing moet worden geaccepteerd, inclusief storing die leidt tot ongewenste werking van het apparaat.

Voor internationale reglementaire vereisten die gelden in andere landen buiten de EU en de VS, kunt u refereren aan de plaatselijke landeisen voor deze gebieden.

In JP: Voldoet aan Japanse radiowetgeving en Japanse zakelijke telecommunicatie wetgeving.

Dit toestel is goedgekeurd conform de Japanse radiowetgeving (電波法) en de Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving (電気通信事業法). Dit apparaat mag niet aangepast worden (anders wordt het toegekende toewijzingsnummer ongeldig).


## Inhoud

Welkom . . . . .	2
Verklaring . . . . .	3
Gebruiksbestemming . . . . .	4
Beschrijving . . . . .	8
Van start met uw Micro Mic . . . . .	10
Aan-/uitschakelen van uw Micro Mic . . . . .	12
Pairen met uw hoortoestellen . . . . .	12
Streaming inschakelen . . . . .	15
Streaming uitschakelen . . . . .	16
Dragen van uw Micro Mic . . . . .	18
Indicatielampje (LED) . . . . .	20
Volumeregelaar en muteknop . . . . .	22
Mute-indicator . . . . .	24
Speciale features . . . . .	24
Testmodus . . . . .	26
Belangrijke informatie . . . . .	28
Algemene waarschuwingen . . . . .	29

Algemene voorzorgsmaatregelen . . . . .	30
Onderhoud ingebouwde accu . . . . .	32
Accuwaarschuwing. . . . .	33
Onderhoud oplader . . . . .	34
Waarschuwing oplader . . . . .	34
Technische specificaties . . . . .	36
Temperatuurtest, transport en opslaginformatie . . . . .	36
Garantie . . . . .	36
Wat dekt de garantie? . . . . .	37
Wat is niet gedekt door de garantie? . . . . .	37
Oplossen van problemen . . . . .	38


## Beschrijving

- 1 Powerknop
- 2 Microfoon
- 3 Microfoon
- 4 Indicatielampje (LED)
- 5 Micro USB-poort voor oplader

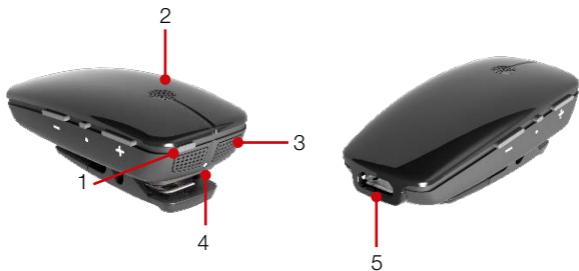



- 6 Knop volume verlagen
- 7 Muteknop
- 8 Knop volume verhogen
- 9 Mute-indicator (LED)
- 10 Pairingknop
- 11 Bevestigingsklem

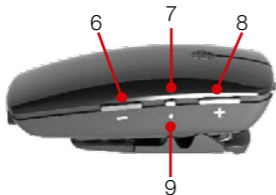


## Van start met uw Micro Mic

Voor u de Micro Mic kunt gebruiken, moet u eerst de accu volledig opladen. Verbind het oplaadsnoer met de oplader en met de mini-USB-poort van de Micro Mic. (zie plaatje).

Steek daarna de oplader in het stopcontact.

Tijdens het opladen is het indicatielampje rood. Wanneer de accu volledig is opgeladen knippert hij om de 2 seconden ook groen.

Gewoonlijk duurt het opladen van een lege accu ongeveer 3 uur. De accu kan gerust 's nachts aan de oplader blijven. U kunt de accu niet overladen.

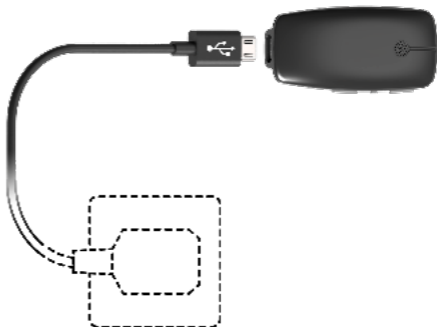

- Laadt u de Micro Mic voor de eerste keer op, doe dat dan minimaal 3 uur. Ook als het indicatielampje al eerder aangeeft dat de accu volledig is opgeladen.
- Laad de accu om veiligheidsredenen alleen op met de door ReSound geleverde oplader.



*Let op: bewaar de Micro Mic in het meegeleverde beschermzakje als u hem niet gebruikt.*



Laad de Micro Mic niet op terwijl u deze op het lichaam draagt.

## **Aan-/uitlezen van uw Mini Micro**

Mini Micro aanzetten: druk op de powerknop (zie pagina 8) en houd hem 1,5 seconde ingedrukt tot het indicatielampje groen wordt. Laat de powerknop los, waarna het indicatielampje elke 2 seconden groen knippert.

Mini Micro uitschakelen: druk 1,5 seconde op de powerknop tot het indicatielampje rood wordt. De Mini Micro schakelt zich nu uit.

Als de batterijspanning laag is, knippert het indicatielampje elke seconde oranje.

## **Pairen met uw hoortoestellen**

*Let op: de volgende informatie is bedoeld voor uw hoorspecialist, die de Mini Micro voor u pairt met uw hoortoestellen. De handelingen zijn echter eenvoudig en u kunt ze ook zelf uitvoeren.*

*U kunt maximaal 3 streamers van ReSound pairen met uw hoortoestellen. (Bijvoorbeeld een Mini Micro en twee TV-streamers). Daarvoor moet kanaal 1, 2 of 3 worden gekozen bij de start van de pairingprocedure.*

### *Pairen van de Micro Mic in kanaal 1*

1. Zorg dat uw Micro Mic is ingeschakeld. Uw hoortoestellen moeten zijn uitgeschakeld: open de batterijlades.
2. Druk met de punt van een pen of iets dergelijks de pairingknop één keer in (zie afbeelding rechts). Het indicatielampje knippert nu om de 2 seconden oranje: de Micro Mic is nu klaar voor pairing in kanaal 1. Uw Micro Mic blijft gedurende 20 seconden in de pairingmodus staan.
3. Schakel tijdens de éénmalige pairingmodus beide hoortoestellen in door de batterijlades te sluiten. Een succesvolle pairing herkent u aan een melodie in beide hoortoestellen. Ook brandt het indicatielampje dan 3 seconden lang oranje. De Micro Mic is nu klaar voor gebruik!







*Pairen van de Micro Mic in kanaal 2 of 3 (als u meer dan één streamingapparaat gebruikt)*

Micro Mic pairen in kanaal 2: druk de pairingknop twee keer in. Het indicatielampje knippert nu om de 2 seconden twee keer geel. De Micro Mic is nu klaar voor pairing in kanaal 2. Sluit de batterijlades van de hoortoestellen.


Micro Mic pairen in kanaal 3: druk de pairingknop drie keer in. Het indicatielampje knippert nu om de 2 seconden drie keer geel. De Micro Mic is nu klaar voor pairing in kanaal 3. Sluit de batterijlades van de hoortoestellen.

Knipperpatroon tijdens pairen:

Aantal keren drukken op pairingsknop	Indicatielampje	Kanaal
1		1
2		2
3		3
Indicatie van een succesvolle pairing		

## Streaming inschakelen

Zet de Micro Mic aan en controleer of uw hoortoestellen zijn ingeschakeld. U kunt het streamen op drie manieren starten.

1. Houd de programmaknop of schuifknop op beide hoortoestellen 3 seconden lang ingedrukt om een gestreamd geluidssignaal\* te horen. Als ear-to-ear-synchronisatie is geactiveerd in uw hoortoestellen, hoeft u de streaming slechts op één van de hoortoestellen in te schakelen.
2. Heeft u een ReSound Unite™ Afstandbediening (optioneel), dan hoeft u slechts op de  streamingknop op de Afstandbediening te drukken\*.
3. Gebruikt u een ReSound-app die ook als afstandbediening werkt, selecteer dan het programma Micro Mic in het programmascherm\*.

\*Als de hoortoestellen zijn verbonden met de Micro Mic, hoort u een kort melodietje in uw hoortoestellen, gevolgd door het geluid dat de Micro Mic opvangt.

### *Streaming inschakelen van een 2e of 3e streamingapparaat*

Als uw hoortoestellen gepaard zijn met meerdere accessoires, dan kunt u de streaming op drie verschillende manieren inschakelen.

1. Houd de programmaknop op het hoortoestel een 2de of 3e keer gedurende 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot het 2de of 3e ReSound streamingapparaat.
2. Gebruikt u een Unite™ Afstandbediening, druk dan de streamingknop op de Afstandbediening een 2e of 3e keer in om toegang te krijgen tot het 2e of 3e ReSound streamingapparaat.
3. Gebruikt u een ReSound-app die ook als afstandbediening werkt, selecteer dan het gewenste streamingprogramma in het programmascherm\*.

## **Streaming uitschakelen**

*U kunt de streaming op drie manieren beëindigen:*

1. Druk een keer op de programmaknop op uw hoortoestellen\*.
2. Met de ReSound Unite™ Afstandbediening (optioneel), hoeft u alleen maar op de knop 'P', midden op het toetsenbord te drukken\*. Of druk op de knop 'Home' om naar uw basisinstellingen terug te keren.
3. Als u een ReSound-app gebruikt, selecteert u het gewenste programma in het programmascherm.

\*Hiermee keren beide hoortoestellen terug naar het laatst gekozen programma.






*Let op: het kan natuurlijk dat u buiten het bereik van de Micro Mic raakt. Wanneer u binnen 5 minuten weer binnen het bereik komt, wordt de verbinding met uw hoortoestellen automatisch hersteld. Dit is ook van toepassing als u de Micro Mic binnen 5 minuten uit- en weer inschakelt.*

## Dragen van uw Micro Mic



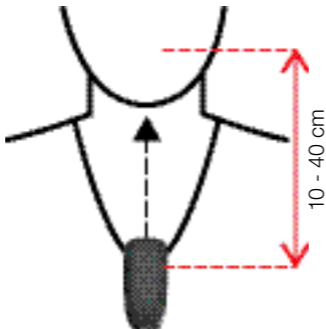




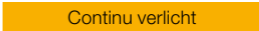
Klem de Micro Mic op de kleding van de spreker of hang hem met het halskoord om de nek. De afstand tussen mond van de spreker en het apparaat moet tussen de 10-40 cm zijn. Gebruikt u de klem, plaats de Micro Mic dan verticaal en laat het indicatielampje richting de mond wijzen.



















## Indicatielampje (LED)

Het indicatielampje op uw Micro Mic is multifunctioneel en geeft informatie over de status van uw apparaat.

Status	Niet bezig met opladen
Power uit	
Power aan (normaal)	
Power aan (volumeregeling uitgeschakeld)	
Power aan (accu bijna leeg)	
Power aan (accu bijna leeg) (volumeregeling uitgeschakeld)	
Volumeregelaar vergrendeld of ontgrendeld (zie pagina 25)	
Powerindicatie bij aanzetten	
Powerindicatie bij uitschakelen	
Testmodus (zie pagina 26)	

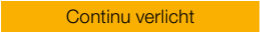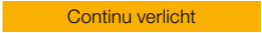Tijdens opladen	Volledig opgeladen
	
	
	
Geen LED-indicatie	Geen LED-indicatie
Geen LED-indicatie	Geen LED-indicatie
	
	
	
	


## Volumeregelaar en muteknop

### *Volumeregeling*

De Micro Mic biedt vanaf het moment dat hij wordt aangezet een comfortabel luisterniveau. Voor sommige apparaten of luisteromgevingen is het tóch wenselijk als u dit zelf kunt aanpassen. Dat kan op verschillende manieren. Let op: de volumewijzigingen gelden alleen voor het geluid van dit apparaat.

- Gebruik de '+' en '-' toets (zie pagina 9) om het volume in te stellen op een comfortabel niveau. Zorg dat uw hoortoestellen goed zijn ingesteld voor het omgevingsgeluid, voordat u de instellingen van de volumeregeling wijzigt.

Bij elke volumewijziging op de Micro Mic knippert de mute-indicator. Als u het maximale of minimale volumeniveau hebt bereikt, licht de mute-indicator iets langer (1 seconde) oranje op.

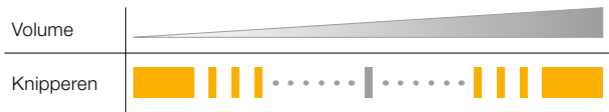



*Let op: de Micro Mic schakelt terug naar het standaardvolume als u hem opnieuw start.*

Gebruik de Resound Unite™ Afstandbediening (optioneel) om het streamingvolume in uw hoortoestel te regelen. Vraag uw hoor-specialist voor meer informatie over deze accessoire.


### *Hoortoestellen*

U en de drager kunnen het signaal van de Micro Mic uitschakelen als de drager van het apparaat gesprekken voert of activiteiten doet die niet relevant zijn voor u.

- Signaal uitschakelen: druk de muteknop (zie pagina 9) één keer in. De mute-indicator knippert oranje.
- Druk nogmaals op de muteknop om het signaal weer in te schakelen. De mute-indicator stopt met knipperen.

*Let op: als u de Micro Mic opnieuw opstart terwijl hij op mute staat, wordt het geluid weer ingeschakeld.*

## Mute-indicator

Configuratie	Knipperpatroon
Normaal gebruik, geluid ingeschakeld	
Normaal gebruik, geluid uitgeschakeld	

## Speciale features

### *Valherkenning*

Als de Micro Mic meer dan 75 cm naar beneden valt, schakelt een ingebouwde sensor het geluid dat naar de hoortoestellen wordt gestreamd, gedurende 2 seconden uit. Zo bent u beschermd tegen een harde knal in uw oren als de Micro Mic per ongeluk valt.

### *Zo vergrendelt u de volumeregelaar*

U kunt het volume van de Micro Mic op een specifiek niveau vergrendelen. Als de volumeregeling is vergrendeld kunt u het apparaat nog steeds op mute/unmute zetten.

### *Zo vergrendelt u de volumeregelaar*



- Zorg ervoor dat uw Micro Mic is uitgeschakeld.
- Druk de volumeknop ‘-’ en de powerknop in en houd ze 1,5 seconde vast tot het indicatielampje groen wordt (Micro Mic aan). Laat de powerknop los.
- Houd de volumeknop ‘-’ ingedrukt tot er na 10 seconden een groen/oranje/rood lichtpatroon verschijnt.

Het indicatielampje knippert nu om de 2 seconden twee keer. Dit geeft aan dat de volumeregeling vergrendeld is.

#### *Zo ontgrendelt u de volumeregelaar*

- Zorg ervoor dat uw Micro Mic is uitgeschakeld.
- Druk de volumeknop ‘+’ en de powerknop in en houd ze 1,5 seconde vast tot het indicatielampje groen wordt (Micro Mic aan). Laat de powerknop los.
- Houd de volumeknop ‘+’ ingedrukt tot er na 10 seconden een groen/oranje/rood lichtpatroon verschijnt.

## Testmodus

De testmodus is vooral bedoeld voor hoorspecialisten om transparantiemetingen te doen bij kinderen. De transparantiemeting evalueert of het hoortoestel en de draadloze microfoons gelijke output hebben als beiden 65dB SPL input hebben.

In de testmodus is de microfoon ingesteld op de omni-directionaliteitsmodus met 0 dB versterking en horizontaal in de testkamer geplaatst. Refereer aan de relevante richtlijnen voor het uitvoeren van transparantiemetingen.

*Zo gaat u naar de testmodus:*

- Zorg ervoor dat uw Micro Mic is uitgeschakeld.
- Druk de muteknop en de powerknop in en houd ze 1,5 seconde vast tot het indicatielampje groen wordt. Laat de powerknop los.
- Houd de muteknop ingedrukt tot er na 10 seconden een groen/oranje/rood lichtpatroon verschijnt.
- In de testmodus is het indicatielampje (zie pagina 8) oranje.
- De testmodus start op het standaardvolume. U kunt het volume aanpassen op de Micro Mic tot de transparantie is geverifieerd.

- Verlaat de testmodus en sla de instellingen op door de Micro Mic uit te zetten en de volumeregeling te vergrendelen (zie 'Zo vergrendelt u de volumeregelaar' in het hoofdstuk 'Speciale features').



*Let op: aanpassingen op de Micro Mic en/of het hoortoestel om transparantie te bereiken, kunt u doen met behulp van de aanpasssoftware.*

## **Belangrijke informatie**

### *Onderhoud en zorg*

- Reinig de Micro Mic met een droge doek. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsproducten (waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om het apparaat te reinigen.
- Als u de Micro Mic niet gebruikt, schakel hem dan uit en berg hem veilig op.
- Bescherm de Micro Mic tegen een overdaad aan vocht (baden, zwemmen) en hitte (verwarming, autodashboard).
- Voorkom grote schokken en trillingen.
- Bescherm de microfoontjes en de USB-poort tegen stof en vuil. Reinig deze zo nodig met het meegeleverde borsteltje.

## Algemene waarschuwingen

- Houd de Micro Mic buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- Kinderen kunnen het snoer en het halskoord rond hun nek wikkelen, met alle gevolgen van dien. Houd deze daarom altijd buiten bereik van kinderen.
- De Micro Mic kan storing veroorzaken op andere apparatuur.
- De Micro Mic gebruikt digitaal gecodeerde overdracht met laag vermogen om met andere draadloze apparaten te communiceren. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving beïnvloed worden. Breng de Micro Mic in dit geval buiten bereik van het betreffende apparaat.
- Wanneer u tijdens gebruik van de Micro Mic last hebt van elektromagnetische storing, verwijder u dan van de bron van de storing.
- Vermijd blootstelling aan regen, vocht of andere vloeistoffen om beschadiging van het apparaat of verwondingen aan uzelf tegen te gaan.
- Houd het product en de kabels uit de buurt van werkende machines.

- Is de Micro Mic oververhit, hard gevallen of beschadigd, is de bedrading of aansluiting beschadigd, of is de Micro Mic in een vloeistof gevallen, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw hoorspecialist.
- Gebruik de Micro Mic niet in omgevingen waar explosiegevaar is of waar het gevaar bestaat dat ontvlambare gassen in brand vliegen.

### **Algemene voorzorgsmaatregelen**

- Gebruik dit apparaat niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten verboden is.
- Straling zoals röntgen, CT-scans en MRI-scans kunnen het functioneren van de Micro Mic nadelig beïnvloeden. We adviseren u de Micro Mic uit te schakelen voordat u een procedure met dergelijke straling ondergaat. Houd de Micro Mic buiten de kamer.
- Hoogspanningsapparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen mogelijk het signaal aantasten en de reikwijdte aanzienlijk verminderen.
- Indien de hoortoestellen niet reageren op de Micro Mic vanwege een ongebruikelijke storing, verwijder u dan van het storingsveld.

- Uw hoortoestellen en het gepairde apparaat hebben bij het pairen een unieke netwerkcode gekregen. Hierdoor kan de Micro Mic geen hoortoestellen van anderen beïnvloeden.
- Breng geen veranderingen of modificaties aan op dit apparaat.
- Het volledig openen van de Micro Mic kan het apparaat beschadigen. Als zich problemen voordoen die u niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw hoorspecialist.
- De Micro Mic mag alleen gerepareerd worden door een geautoriseerd servicecenter.
- Gebruik de Micro Mic niet in gebieden waar RF transmissie verboden is, zoals in vliegtuigen, etc.
- Pair de Micro Mic alleen met toestellen waar hij expliciet voor bedoeld is.

## Onderhoud ingebouwde accu

Neem s.v.p. het onderstaande in acht.

- Uw apparaat wordt gevoed door een oplaadbare accu.
- Een nieuwe accu presteert pas optimaal nadat hij twee of drie keer volledig opgeladen en weer ontladen is.
- De accu kan honderden keren opgeladen en ontladen worden, maar uiteindelijk zal hij 'opragen'.
- Haal de oplader uit het stopcontact en ontkoppel hem van de Micro Mic als hij niet in gebruik is.
- Een volledig opgeladen accu verliest na verloop van tijd zijn lading.
- Als u het apparaat op hete plaatsen achterlaat, zoals in een afgesloten auto in de zon, neemt de capaciteit en de levensduur van de accu af.
- Een apparaat met een koude accu werkt mogelijk niet, ook al is de accu volledig opgeladen. De prestaties van de accu zijn met name beperkt in temperaturen ruim onder het vriespunt.



## Accuwaarschuwing

- Let op: de accu die in dit apparaat gebruikt wordt, kan bij verkeerd gebruik een risico tot brand of chemische brandwonden vormen.
- Probeer het apparaat niet te openen of de accu te vervangen. Deze is ingebouwd en niet vervangbaar. Het gebruik van andere accu's geeft een risico op brand of ontploffing en de garantie is in dat geval niet meer geldig.
- De accu in uw apparaat mag u niet verwijderen of vervangen. Elke poging daartoe is riskant en kan schade aan het apparaat veroorzaken.
- Laad de Micro Mic alleen op met de bijgeleverde oplader.
- Ruim de accu op in overeenstemming met de lokale reglementen. Hergebruik hem indien mogelijk.
- Gooi de accu niet bij het huishoudelijk afval of in een vuur, omdat hij kan exploderen.
- Accu's kunnen exploderen als ze beschadigd zijn.

## Onderhoud oplader

Neem s.v.p. het onderstaande in acht als er een oplader is geleverd bij dit apparaat.

- Probeer de accu niet op te laden met een andere dan de meegeleverde AC-oplader. Gebruik van andere opladers kan het apparaat beschadigen of vernielen en kan gevaarlijk zijn.
- Gebruik van andere opladers kan alle rechten op garantie beëindigen.
- Om na te gaan of er goedgekeurde verbeteringen beschikbaar zijn, gaat u naar uw hoorspecialist.
- Laad het apparaat op volgens de meegeleverde instructies.

## Waarschuwing oplader

Gebruik het apparaat alleen met de oplader die is meegeleverd. Het gebruik van andere opladers kan het apparaat beschadigen of vernielen en kan gevaarlijk zijn. Gebruik van andere opladers kan alle rechten op garantie beëindigen.

- Als u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, trek dan altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.

- Gebruik nooit een beschadigd snoer.
- Probeer de oplader nooit uit elkaar te halen, omdat u zich dan blootstelt aan het gevaar van een elektrische schok.
- Het incorrect weer in elkaar zetten kan tijdens het gebruik een elektrische schok of zelfs brand veroorzaken.
- Vermijd het opladen in extreem hoge of lage temperaturen en gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimtes.



Laad de Micro Mic niet op terwijl u deze op het lichaam draagt.

## **Technische specificaties**

Operationeel bereik:	tot 25 meter (duidelijke zichtlijn)
Voeding:	externe adapter
Draadloos:	2.4 GHz
Bedrijfs- en oplaadtemperatuur:	0 tot 45°C
Bewaartemperatuur:	-20 tot 45°C

## **Temperatuurtest, transport en opslaginformatie**

Dit product is onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten in verwarmingscycli tussen -25 °C en +70 °C conform interne- en industriestandaarden.

## **Garantie**

De Micro Mic heeft een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de dag van aankoop. Houd er rekening mee dat er in uw land mogelijk andere garanties gelden. Neem contact op met uw hoorspecialist voor meer informatie.

## **Wat dekt de garantie?**

Een elektrisch apparaat dat door montage-, fabricage-, of ontwerpfouten, bij normaal gebruik gedurende de looptijd van de fabrieksgarantie, niet naar behoren functioneert, wordt kosteloos vervangen of gerepareerd. U dient de Micro Mic hiervoor terug te brengen naar het verkooppunt. Als blijkt dat een reparatie niet haalbaar is, kan het gehele apparaat vervangen worden door een vergelijkbaar apparaat. Uiteraard na wederzijds akkoord van u en uw hoorspecialist.

## **Wat is niet gedekt door de garantie?**

Problemen ten gevolge van onjuiste behandeling of onderhoud, overmatig gebruik, ongevallen, reparaties uitgevoerd door een onbevoegde partij, blootstelling aan corrosieve omstandigheden of schade ten gevolg van vreemde voorwerpen in het apparaat zijn NIET gedekt door de beperkte garantie en maken de garantie mogelijk zelfs ongeldig. Bovenstaande garantie heeft geen invloed op alle juridische rechten die u zou kunnen hebben onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Uw hoorspecialist heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder gaat dan onze bepalingen. Neem hierover contact op met uw hoorspecialist.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Datum van aankoop: \_\_\_\_\_

# OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oorzaak
De Micro Mic gaat niet aan	U hebt de powerknop niet lang genoeg ingedrukt gehouden
	De accuspanning van de Micro Mic is te laag om te streamen
De Micro Mic gaat niet uit	U hebt de powerknop niet lang genoeg ingedrukt gehouden
Kan volume niet wijzigen met behulp van de volumeregelaar op de Micro Mic	De volumeregelaar op de Micro Mic kan vergrendeld zijn op een specifiek niveau
Ik hoor geen geluid in de hoortoestellen, zelfs al is het streamingprogramma actief	De Micro Mic en het hoortoestel zijn buiten elkaars draadloze bereik
	De Micro Mic is uitgeschakeld
	De accuspanning van de Micro Mic is te laag om te streamen
	De Micro Mic staat op mute

## Mogelijke oplossing

Houd de powerknop ten minste 1,5 seconde ingedrukt tot het indicatielampje 3 seconden lang groen is

Laad de accu op

Houd de powerknop ten minste 1,5 seconde ingedrukt tot het indicatielampje 3 seconden lang rood is

Ontgrendel de volumeregelaar (zie hoofdstuk 'Speciale features, Zo vergrendelt u de volumeregelaar')

Verzeker u ervan dat de Micro Mic en de hoortoestellen zich binnen elkaars draadloze bereik bevinden

Zet de Micro Mic aan en activeer het streamen opnieuw

Laad de accu op

Zet het geluid van de Micro Mic weer aan

# OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	OORZAAK
De programmaknop op het hoortoestel heb ik langer dan 3 seconden ingedrukt, zonder resultaat	De Micro Mic en de hoortoestellen zijn niet gepaird
Als het pairingproces klaar is, klinkt er geen melodie in het hoortoestel	De Micro Mic en de hoortoestellen bevinden zich buiten elkaars draadloze bereik
	De Micro Mic en de hoortoestellen hebben niet gelijktijdig in de pairingmodus gestaan
De streaming naar één of beide hoortoestellen valt onverwacht weg	De batterij in een of beide hoortoestellen is bijna op, zodat de audiostreaming niet meer wordt ondersteund



## MOGELIJKE OPLOSSING

Doorloop de pairingprocedure

Verzeker u ervan dat de Micro Mic en de hoortoestellen zich binnen elkaars draadloze bereik bevinden en herhaal het pairingproces

Herhaal het pairingproces en verzeker u ervan dat de batterijlades van beide hoortoestellen gesloten worden binnen 20 seconden nadat de pairingknop op de Micro Mic is ingedrukt

Vervang de batterij in één of beide hoortoestellen en activeer de streaming opnieuw

# OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oorzaak
Het geluidsniveau van de Micro Mic is erg laag	De Micro Mic wordt niet correct gedragen door de spreker
	Het geluid dat door de Micro Mic wordt ontvangen is erg zacht

## Mogelijke oplossing

Bevestig de Micro Mic op de kleding van de spreker of hang hem om de hals met behulp van het nekkoord, zodat hij zich binnen 10-40 cm van de mond van de spreker bevindt

Verhoog het volume met behulp van de '+' toets op de Micro Mic

Lees informatie met een waarschuwingssymbool zorgvuldig door.



**WAARSCHUWING** wijst op situaties die kunnen leiden tot ernstige verwondingen.

**VOORZORGSMAATREGEL** geeft situaties aan die kunnen leiden tot lichte verwondingen.



Advies en tips over het gebruik van uw accessoire.



Dit apparaat bevat een RF-zender die werkt tussen de frequenties 2.4 GHz - 2.48 GHz.



Vraag uw audicien naar het afvoeren van uw Micro Mic



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en de R&TTE Richtlijn 1999/5/EEC dienen gericht te worden aan GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denemarken







**Internationaal hoofdkantoor**  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Denemarken  
Tel.: +45 45 75 11 11  
www.resound.com  
CVR no. 55082715

**GN Hearing Benelux B.V.**  
Resound  
Postbus 85  
6930 AB Westervoort  
Nederland  
Tel.: +31 (0)26 319 5000  
info@gnresound.nl  
www.resound.com

**Contactgegevens België**  
Tel.: +32 (0)2 513 55 91  
info@gnresound.be  
www.resound.com